

lifeinabox

Live your life



Bedienungsanleitung (DE)



lifeina

Lifeina

6 rue de Castellane
75008, Paris, France
hello@lifeina.com

INHALTSVERZEICHNIS

<i>Was ist Lifeinbox?</i>	5
<i>Verbindung mit der lifeina-App</i>	6
<i>Was wird mit Lifeinbox geliefert?</i>	6
<i>Was sind die Innenmaße der Lifeinbox?</i>	6
<i>Was sind die Abmessungen der Lifeinbox?</i>	6
<i>Für welche Medikamente kann ich Lifeinbox verwenden?</i>	7
<i>Das Aufladen der Lifeinbox-Batterie</i>	7
<i>Verwendung von Lifeinbox</i>	8
<i>Wie ist die Temperatur in Lifeinbox?</i>	8
<i>Bei welcher Temperatur kann ich Lifeinbox verwenden?</i>	8
<i>Wie lange hält der Akku?</i>	8
<i>Das Lifeinbox-Logo ausschalten</i>	9
<i>Verwendung von Lifeinbox im Auto</i>	9
<i>Verwendung von Lifeinbox im Flugzeug</i>	9
<i>Wo bewahre ich meine Lifeinbox im Flugzeug auf?</i>	9
<i>Kann ich Lifeinbox im Handgepäck verwenden?</i>	10
<i>Kann ich Lifeinbox in einem Koffer verwenden?</i>	10
<i>Kann ich Lifeinbox aufrecht verwenden?</i>	11
<i>Verhindert Lifeinbox das Einfrieren meiner Medikamente?</i>	11
<i>Alarmfunktion</i>	11
<i>Warum blinkt rotes/blauges Licht an meiner Lifeinbox?</i>	11
<i>Ist die Lifeinbox wasserdicht?</i>	11
<i>Wie hoch ist der Stromverbrauch der Lifeinbox?</i>	12
<i>Pflege und Wartung</i>	12
<i>Die Qualitätsgarantie von lifeina</i>	12
<i>Technische Spezifikationen</i>	13

WILLKOMMEN BEI DER LIFEINA FAMILIE

Lifeinbox ist ein Produkt der Liebe und des Glücks. Wir bemühen uns, ein so perfektes Gerät wie möglich herzustellen. Wenn Sie Anmerkungen oder Vorschläge haben, zögern Sie nicht, uns unter hello@lifeina.com zu kontaktieren. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

WAS IST LIFEINBOX?

Lifeinbox ist ein Minikühlschrank zur sicheren Aufbewahrung empfindlicher Medikamente. Lifeinbox ist mit einem Temperaturregler ausgestattet, der das Gerät einschaltet, wenn die Innentemperatur 8°C (46°F) erreicht, und es ausschaltet, wenn sie auf 2°C (36°F) sinkt. Lifeinbox verhindert nicht, dass Medikamente gefrieren, wenn die Umgebungstemperatur unter 0°C (32°F) fällt.

Lifeinbox ist für eine möglichst einfache Bedienung konzipiert. Schließen Sie die Stromversorgung (Auto, Netzstrom oder Batterie) des Geräts an, warten Sie, bis sich die Temperatur stabilisiert hat (etwa 15 Minuten), und legen Sie Ihre Medikamente hinein. Wenn die Temperatur zwischen 2 und 8°C erreicht ist, beginnt das Logo auf der Vorderseite des Geräts zu "atmen". Unter dem Gerät befindet sich ein O/I-Batterieschalter. Wenn Sie die Batterie verwenden möchten, stellen Sie diesen auf die ON-Position.

Die Umgebung, in der Lifeinbox verwendet wird, ist sehr wichtig. Es muss auf einer vollständig ebenen Oberfläche verwendet werden, damit die Öffnungen unter und an der Seite des Geräts nicht blockiert werden. Wenn sie in irgendeiner Weise blockiert sind, wird Lifeinbox nicht die richtige Temperatur für Ihre Medikamente haben. Wenn Sie mit dem Auto reisen, verwenden Sie die LifeinaTravel-Transporttasche, damit die Lifeinbox nicht auf dem Fahrzeugboden oder auf einer unebenen Oberfläche platziert wird. Wenn sie auf dem Boden eines Autos platziert wird, saugt sie Staub an, der schließlich den Lüfter blockieren wird.

Lifeinbox wird mit einem 12V DC-Anschluss (für das Auto) und einem 110/240V AC-Adapter (für zu Hause) geliefert. Batteriepacks (LifeinaPower) sind auch als separate Käufe erhältlich. Das Ändern

des Stromkabels oder die Verwendung eines Kabels, das nicht mit Lifeinbox geliefert wurde, kann das Gerät beschädigen, die Wirksamkeit Ihrer Medikamente gefährden und Ihre Garantie ungültig machen. Wenn Sie Lifeinbox für Medikamente in Glasflaschen verwenden, empfehlen wir Ihnen, Polstermaterial zwischen Ihre Medikamentenflaschen zu legen, um sie vor unbeabsichtigtem Bruch zu schützen.

VERBINDUNG MIT DER LIFEINA-APP

Laden Sie die Lifeina-App auf Ihr handy herunter (iOS oder Android).

1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem handy ein.
2. Schließen Sie Lifeinbox an eine Stromquelle an.
3. Öffnen Sie die Lifeina-App auf Ihrem handy. Platzieren Sie Lifeinbox in der Nähe Ihres handy und folgen Sie den Anweisungen in der App.

WAS WIRD MIT LIFEINABOX GELIEFERT?

- Ein tragbarer Kühlschrank von etwa 22 x 11 x 10 cm
- Ein ACDC 110/220V-Adapter mit 4 verschiedenen Steckern für die Vereinigten Staaten, China, Europa, die Schweiz und das Vereinigte Königreich
- Ein Kabel zum Anschließen der Lifeinbox an den Zigarettenanzünder Ihres Autos

WAS IST DIE GRÖSSE DES HOHLRAUMS IN LIFEINABOX?

Die genauen Abmessungen des Hohlraums sind 180 mm breit x 64 mm tief x 40 mm hoch.

WAS SIND DIE ABMESSUNGEN VON LIFEINABOX?

Lifeinbox misst 22 cm breit, 10,7 cm hoch und 11 cm tief und wiegt etwa 1,400 kg.


FÜR WELCHE MEDIKAMENTE KANN ICH LIFEINABOX VERWENDEN?

Lifeinbox ist für jedes Medikament konzipiert, das bei einer Temperatur zwischen 2 und 8°C (35,6 bis 46,4°F) aufbewahrt werden muss. Dies umfasst Insulin, Adrenalin, Wachstumshormone, Medikamente gegen Arthritis und viele andere. Der Hohlraum der Lifeinbox ist für vorgefüllte Pens, Spritzen oder Fläschchen geeignet. Wenn es in den Hohlraum passt, wird es auf der richtigen Temperatur gehalten. Laden Sie unseren umfassenden Medikamentenführer auf www.lifeina.com für weitere Informationen herunter.

DAS AUFLADEN DER LIFEINABOX-BATTERIE

Die Batterie der Lifeinbox muss vollständig aufgeladen werden, bevor Sie das Gerät verwenden (siehe Schema 1).

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist (1)
2. Stellen Sie den O/I-Schalter unter dem Gerät auf die ON-Position (2).
3. Drücken Sie die Taste an der Seite des Geräts (3), bis das Logo an der Vorderseite erlischt (etwa 5 Sekunden).
4. Lassen Sie es zwei Stunden oder eine ganze Nacht aufladen.
5. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Taste an der Seite des Geräts drücken, und überprüfen Sie mit der Lifeina-Anwendung, ob es vollständig aufgeladen ist.

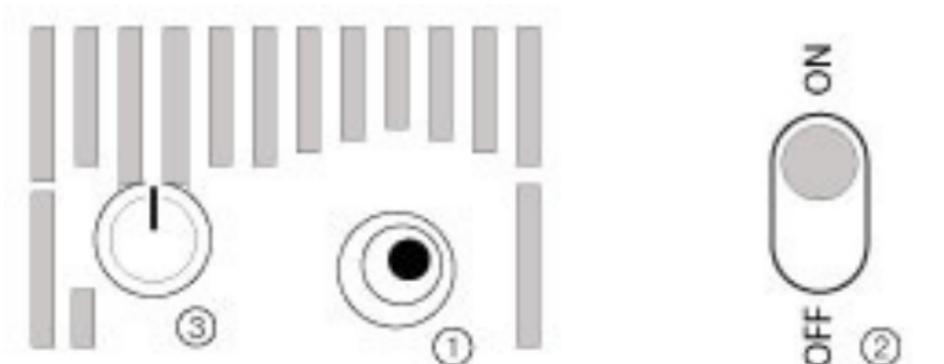

Schema 1

VERWENDUNG VON LIFEINABOX

- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und laden Sie die Batterie vollständig auf (siehe oben).
- Schalten Sie Lifeinabox ein, indem Sie die Taste an der Seite des Geräts drücken.
- Warten Sie, bis Lifeinabox eine stabile Temperatur erreicht hat (etwa 15 Minuten).
- Legen Sie Ihr Medikament hinein.
- Um die Lifeina-Anwendung zu nutzen, müssen Sie nur die App herunterladen und sie in der Nähe Ihrer Lifeinabox starten.

WIE IST DIE TEMPERATUR IN LIFEINABOX?

Die Umgebung, in der Lifeinabox verwendet wird, hat einen gewissen Einfluss auf die erzeugte Kältemenge. Lifeinabox ist so eingestellt, dass Ihre Medikamente bei einer Temperatur zwischen 2 und 8°C (35,6 bis 46,4°F) aufbewahrt werden.

BEI WELCHER TEMPERATUR KANN ICH LIFEINABOX VERWENDEN?

Wie der Kühlschrank in Ihrem Haus wird es weniger effizient sein, wenn es extremen Bedingungen ausgesetzt wird. Lifeinabox kann bis zu einer Umgebungstemperatur von 32°C verwendet werden. Bei dieser Temperatur bleibt Lifeinabox zwischen 2 und 8°C. Wenn Sie Lifeinabox jedoch bei dieser Temperatur verwenden, werden die Batterien nicht so lange halten.

WIE LANGE HÄLT DER AKKU?

Lifeinabox ist mit einem internen Akku mit 6 Stunden Laufzeit ausgestattet, für den Fall eines Stromausfalls. Wir haben auch separate Batteriepacks (LifeinaPower) mit jeweils 12 Stunden Laufzeit entwickelt. Diese Batterien bieten Ihnen mehr Flexibilität und können mit den Kabeln Ihres Mobiltelefons aufgeladen werden. Für Reisen sind unsere Isoliertaschen (LifeinaBag12 und LifeinaBag24) einfacher zu verwenden, wenn Sie fliegen.

AUSSCHALTEN DES LOGOS VOR DER LIFEINABOX

Sie können das Logo ausschalten, indem Sie den Akku einschalten und dann auf die O/I-Taste rechts am Gerät doppelklicken.

VERWENDUNG DER LIFEINABOX IN EINEM AUTO

LifeinaBox wird mit einem Kabelanschluss für den Zigarettenanzünder Ihres Autos geliefert. Um die LifeinaBox in einem Auto zu verwenden, müssen Sie jedoch auch die LifeinaTravel-Transporttasche verwenden und die LifeinaBox an der Rückenlehne eines Sitzes aufhängen, damit die Belüftungsöffnungen unter dem Gerät frei sind. Wenn Sie die LifeinaBox auf eine unebene Oberfläche stellen, können Sie die Belüftungsöffnungen blockieren, und wenn Sie die LifeinaBox auf den Boden des Autos stellen, saugt sie den gesamten Staub vom Boden des Autos auf, und dies wird schließlich das Belüftungssystem blockieren.

VERWENDUNG DER LIFEINABOX IN EINEM FLUGZEUG

LifeinaBox wurde nicht wirklich für den Einsatz in einem Flugzeug entwickelt. Es wurde eher für Hotels, Autos, Büro und Zuhause entwickelt. Obwohl Sie die LifeinaBox im Flugzeug verwenden können, ist es viel einfacher, unsere speziell angefertigten LifeinaBags zu verwenden, die einfach so viel einfacher sind und in Ihr Handgepäck passen. Wenn Sie sich jedoch entscheiden, die LifeinaBox in einem Flugzeug zu verwenden, kaufen Sie bitte die LifeinaTravel-Transporttasche, die es Ihnen ermöglicht, die LifeinaBox mit geöffneten Belüftungsöffnungen zu transportieren.

WO BEWAHRE ICH MEINE LIFEINABOX IM FLUGZEUG AUF?

Schalten Sie das Gerät vollständig aus und legen Sie es in Ihr Hauptgepäck. Halten Sie Ihre Medikamente immer bei sich, ungeachtet des Transportmittels; **TRENNEN SIE SICH NIEMALS VON IHREN MEDIKAMENTEN!** Wenn Ihr Gepäck verloren geht oder Ihr Flug verspätet ist, kann dies Ihren Urlaub verderben. Obwohl es möglich ist, LifeinaBox in einem Flugzeug zu verwenden, denken wir, dass es für Flugreisen einfacher ist, eine unserer Isolier-

taschen zu verwenden (LifeinaBag12 oder LifeinaBag24, die Ihre Medikamente ebenfalls zwischen 2 und 8°C aufbewahren). Die Taschen sind einfacher in Ihr Handgepäck zu legen als ein tragbarer Kühlschranks. Wir verwenden Lifeinabox mehr in einem Auto, Hotel oder zu Hause als in einem Flugzeug.

Aber wenn Sie Ihre Lifeinabox auf Reisen mit in das Flugzeug nehmen möchten, gibt es wirklich kein Problem, dies zu tun. Sie benötigen die LifeinaTravel-Hülle, um Lifeinabox zu transportieren, und vielleicht möchten Sie auch einen zusätzlichen Akku kaufen (LifeinaPower).

KANN ICH LIFEINABOX IN MEINEM HANDGEPÄCK VERWENDEN?

Nein. Lifeinabox ist ein Kühlschranks und benötigt Belüftung (unter und an der Seite des Geräts). Wenn Sie es in einen geschlossenen Koffer legen und das Gerät eingeschaltet ist, wird Lifeinabox überhitzen. Wenn Sie wirklich mit Lifeinabox fliegen möchten, müssen Sie LifeinaTravel verwenden, eine spezielle Tragetasche, die wir mit Öffnungen für die Belüftung entwickelt haben.

Als wir Lifeinabox entwickelten, war es nicht wirklich als Gerät für Flugzeuge konzipiert. Lifeinabox wurde eher für die Verwendung in Hotels, im Büro, zu Hause oder im Auto entwickelt. Obwohl es theoretisch möglich ist, es in Flugzeugen zu verwenden, ist es nicht sehr praktisch. Es ist viel einfacher, eine unserer Isoliertaschen (LifeinaBag) zu verwenden, die Ihre Medikamente zwischen 2 und 8°C für 12 oder 24 Stunden hält und die einfach in Ihr Handgepäck geschoben werden kann. Die Tasche ist wasserdicht und sollte in einer trockenen Umgebung aufbewahrt werden.

KANN ICH LIFEINABOX IN EINEM SCHRANK ODER IN EINEM KOFFER VERWENDEN?

Nein. Genau wie ein normaler Kühlschranks kühlt die LifeinaBox, indem sie Wärme entzieht. Wärme muss abgeführt werden. Verwenden Sie die LifeinaBox also nicht in einem Bereich, in dem es wenig oder keinen Luftaustausch gibt, da die Wärme nirgendwo hingehen kann.

KANN ICH LIFEINABOX IN EINER AUFRECHTEN POSITION VERWENDEN?

Nein, wenn Sie es in horizontaler Position verwenden, blockieren Sie die Belüftungsöffnungen und das Gerät überhitzt.

WIRD LIFEINABOX DAS EINFRIEREN MEINER ARZNEIMITTEL VERHINDERN?

Eine Voreinstellung des Geräts verhindert, dass Ihre Medikamente unter 2 °C sinken, um sicherzustellen, dass Ihre Medikamente niemals einfrieren. Allerdings muss die LifeinaBox bei „normalen“ Temperaturen verwendet werden. Wenn Sie Ihre LifeinaBox bei Temperaturen unter Null Grad aufbewahren, verhindert dies nicht, dass Ihre Medikamente gefrieren.

ALARMFUNKTION

Ein Alarm ertönt, wenn der Akku zu 20 % aufgeladen ist. Um diesen Alarm auszuschalten, klicken Sie einfach auf die O/I-Taste auf der rechten Seite des Geräts. Bitte schließen Sie Ihre LifeinaBox so schnell wie möglich an das Stromnetz an, um eine Unterbrechung der Kälteversorgung zu vermeiden.

WARUM BLINKT AN DER SEITE MEINER LIFEINABOX EIN ROT/BLAUES LICHT?

Das kleine an der Seite der LifeinaBox (neben der O/I-Taste) leuchtet konstant blau, wenn die LifeinaBox über Bluetooth mit Ihrem Telefon oder Computer verbunden ist. Wenn es abwechselnd rot und blau blinkt, bedeutet dies, dass Ihr Gerät mit nichts verbunden ist.

IST LIFEINABOX WASSERDICHT?

Nein, LifeinaBox ist wie jedes elektrische Gerät. Es ist nicht wasserdicht und sollte in einer trockenen Umgebung aufbewahrt werden.

WIE HOCH IST DER STROMVERBRAUCH VON LIFEINABOX?

Lifeinbox verbraucht 4,5 Ampere bei 12V DC, etwa das Gleiche wie ein einzelner Scheinwerfer. Lifeinbox sollte eine vollständig aufgeladene Batterie nicht entladen oder beschädigen, wenn sie während des Motorbetriebs verwendet wird. Jedes Fahrzeug und jede Batterie ist einzigartig. Bitte Sie Ihren Händler oder Mechaniker, die Qualität Ihrer Batterie zu überprüfen, bevor Sie ein Gerät anschließen, das diese entladen könnte.

PFLEGE UND WARTUNG

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, modifizieren Sie es nicht und zerlegen Sie es nicht.
- Biegen oder verdrehen Sie die Stromkabel nicht.
- Es befinden sich Belüftungsöffnungen an den Seiten und unter dem Gerät. Diese Öffnungen müssen frei gehalten werden, damit die Luft zirkulieren kann. Schließen Sie Lifeinbox nicht an eine Stromquelle an, wenn es sich in einem geschlossenen Raum befindet, wie Handgepäck oder einer Schreibtischschublade.
- Lifeinbox darf niemals in Flüssigkeit getaucht oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Verwenden Sie ein mit Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch, um das Gerät zu reinigen.
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen, direkte Sonneneinstrahlung, hohe Luftfeuchtigkeit oder Staub.

DIE QUALITÄTSGARANTIE VON LIFEINA

Wir garantieren Lifeinbox für ein Jahr ab dem Datum des Kaufs durch den Kunden. Während dieses Zeitraums sorgt Lifeina für die kostenlose Reparatur interner Defekte oder Herstellungsfehler. Wenn Sie ein Problem mit Ihrer Lifeinbox haben, verpacken Sie sie sorgfältig und senden Sie sie an das Lifeina-Büro, begleitet von einer Kopie Ihrer Rechnung. Leider deckt unsere Garantie keine Schäden ab, die durch Stürze oder Stöße, durch falsche Verwendung oder den Eingriff Dritter, durch Naturkatastrophen oder durch Wasser verursacht wurden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Parameter	Wert
Abmessungen	220 (B) x 107 (T) x 110 (H) mm
Kapazität	180 x 65 x 40 mm (468 cm ³)
Nettogewicht	1400 g
Spannung	12V DC (Auto) oder 110-240V AC
Stromverbrauch	25 Watt max
Temperaturbereich	2°C bis 8°C, +/- 1°C
Isolation	FCKW-freier Polyurethanschaum
System	Verschleißfreie thermoelektrische Technologie mit internem Halbleiterlüfter
Material	ABS

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung technischen Verbesserungen, Änderungen oder Anpassungen unterliegen.



www.lifeina.com

Lifeina

6 rue de Castellane
75008, Paris, France

hello@lifeina.com