

lifeinabox

Live your life



Gebruiksaanwijzing (NL)



Lifeina

6 rue de Castellane
75008, Paris, France
hello@lifeina.com

INHOUDSOPGAVE

<i>Wat is Lifeinabox?</i>	5
<i>Verbinden met de Lifeina-app</i>	6
<i>Wat wordt meegeleverd met Lifeinabox?</i>	6
<i>Wat zijn de binnen afmetingen van de Lifeinabox?</i>	6
<i>Wat zijn de afmetingen van de Lifeinabox?</i>	6
<i>Voor welke medicijnen kan ik Lifeinabox gebruiken?</i>	7
<i>Het opladen van de Lifeinabox-batterij</i>	7
<i>Gebruik van Lifeinabox</i>	8
<i>Wat is de temperatuur in Lifeinabox?</i>	8
<i>Bij welke temperatuur kan ik Lifeinabox gebruiken?</i>	8
<i>Wat is de levensduur van de batterij?</i>	8
<i>Het Lifeinabox-logo uitschakelen</i>	9
<i>Gebruik van Lifeinabox in een auto</i>	9
<i>Gebruik van Lifeinabox in een vliegtuig</i>	9
<i>Waar bewaar ik mijn Lifeinabox in het vliegtuig?</i>	10
<i>Kan ik Lifeinabox in mijn handbagage gebruiken?</i>	10
<i>Kan ik Lifeinabox in een koffer gebruiken?</i>	11
<i>Kan ik Lifeinabox rechtop gebruiken?</i>	11
<i>Voorkomt Lifeinabox dat mijn medicijnen bevriezen?</i>	11
<i>Alarmfunctie</i>	11
<i>Waarom knippert er rood/blauw licht op mijn Lifeinabox</i>	11
<i>Is de Lifeinabox waterdicht?</i>	12
<i>Wat is het stroomverbruik van Lifeinabox?</i>	12
<i>Zorg en onderhoud</i>	12
<i>De kwaliteitsgarantie van lifeina</i>	12
<i>Technische specificaties</i>	13

WELKOM BIJ DE LIFEINA FAMILIE

Lifeinabox is een product van liefde en geluk. We streven ernaar om een zo perfect mogelijk apparaat te maken. Als u opmerkingen of suggesties heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via hello@lifeina.com.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

WAT IS LIFEINABOX?

Lifeinabox is een miniatuurkoelkast voor het veilig bewaren van kwetsbare medicijnen. Lifeinabox is uitgerust met een temperatuurregelaar die het apparaat inschakelt wanneer de interne temperatuur 8°C (46°F) bereikt en het uitschakelt wanneer deze daalt tot 2°C (36°F).

Lifeinabox voorkomt niet dat medicijnen bevroren als de omgevingstemperatuur onder 0°C (32°F) daalt.

Lifeinabox is ontworpen voor een zo eenvoudig mogelijke bediening. Sluit de voeding (auto, netspanning of batterij) van het apparaat aan, wacht tot de temperatuur stabiliseert (ongeveer 15 minuten) en plaats uw medicijnen erin. Wanneer de temperatuur tussen 2 en 8°C bereikt, begint het logo aan de voorkant van het apparaat te “ademen”. Onder het apparaat bevindt zich een O/I-batterijschakelaar. Als u de batterij wilt gebruiken, zet deze dan in de ON-positie.

De omgeving waarin Lifeinabox wordt gebruikt, is zeer belangrijk. Het moet op een volledig vlak oppervlak worden gebruikt, zodat de openingen onder en aan de zijkant van het apparaat niet worden geblokkeerd. Als ze op enigerlei wijze geblokkeerd zijn, zal Lifeinabox niet de juiste temperatuur hebben voor uw medicijnen. Wanneer u met de auto reist, gebruik dan de LifeinaTravel-transporttas, zodat de Lifeinabox niet op de vloer van de auto of op een oneffen oppervlak wordt geplaatst. Als het op de vloer van een auto wordt geplaatst, zal het stof opzuigen, wat uiteindelijk de ventilator zal blokkeren.

Lifeinabox wordt geleverd met een 12V DC-connector (voor de auto) en een 110/240V AC-adapter (voor thuis). Batterijpakketten (LifeinaPower) zijn ook verkrijgbaar als onafhankelijke aankopen. Het wijzigen van de voedingskabel of het gebruik van een kabel die niet bij Lifeinabox is geleverd, kan het apparaat beschadigen, de werkzaamheid van uw medicijnen in gevaar brengen en uw garantie ongeldig maken.

Als u Lifeinabox gebruikt voor glazen medicijnflacons, raden we u aan opvulmateriaal tussen uw medicijnflacons te plaatsen om ze te beschermen tegen onbedoelde breuk.

VERBINDEN MET DE LIFEINA-APP

Download de Lifeina-app op uw smartphone (iOS of Android).

1. Zet Bluetooth aan op uw smartphone.
2. Sluit Lifeinabox aan op een stroombron.
3. Open de Lifeina-app op uw smartphone. Plaats Lifeinabox in de buurt van uw smartphone en volg de instructies in de app.

WAT WORDT MEEGELEVERD MET LIFEINABOX?

- Een draagbare koelkast van ongeveer 22 x 11 x 10 cm
- Een ACDC 110/220V-adapter met 4 verschillende stekers voor de Verenigde Staten, China, Europa, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk
- Een kabel om Lifeinabox aan te sluiten op de sigarettenaansteker van uw auto

WAT IS DE GROOTTE VAN DE HOLTE IN LIFEINABOX?

De exacte afmetingen van de holte zijn 180 mm breed x 64 mm diep x 40 mm hoog.

WAT ZIJN DE AFMETINGEN VAN LIFEINABOX?

Lifeinabox meet 22 cm breed, 10,7 cm hoog en 11 cm diep, en

weegt ongeveer 1,400 kg.


VOOR WELKE MEDICIJNEN KAN IK LIFEINABOX GEBRUIKEN?

Lifeinabox is ontworpen voor elk medicijn dat moet worden bewaard bij een temperatuur tussen 2 en 8°C (35,6 tot 46,4°F). Dit omvat insuline, adrenaline, groeihormonen, medicijnen tegen artritis en vele andere. De holte van Lifeinabox is geschikt voor voor-gevulde pennen, spuiten of flacons. Als het in de holte past, wordt het op de juiste temperatuur gehouden. Download onze uitgebreide medicijnengids op www.lifeina.com voor meer informatie.

HET OPLADEN VAN DE LIFEINABOX-BATTERIJ

De batterij van de Lifeinabox moet volledig worden opgeladen voordat u het apparaat gaat gebruiken (zie schema 1).

1. Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op het stroomnet (1)
2. Zet de O/I-schakelaar onder het apparaat in de ON-positie (2).
3. Druk op de knop aan de zijkant van het apparaat (3) totdat het logo aan de voorkant uitgaat (ongeveer 5 seconden).
4. Laat het twee uur of een hele nacht opladen.
5. Schakel het apparaat in door op de knop aan de zijkant van het apparaat te drukken en controleer of het volledig is opgeladen met behulp van de Lifeina-applicatie.

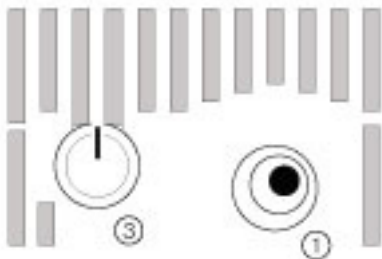

schema 1

GEBRUIK VAN DE LIFEINABOX

- Sluit het apparaat aan op stroom en laad de batterij volledig op (zie hierboven)
- Schakel de LifeinaBox in door op de knop aan de zijkant van het apparaat te drukken
- Wacht tot de LifeinaBox een stabiele temperatuur heeft bereikt (ca. 15 minuten)
- Plaats uw medicatie erin
- Om de Lifeina-applicatie te gebruiken, downloadt u eenvoudigweg de app en zet u deze aan binnen het bereik van uw LifeinaBox

WAT IS DE TEMPERATUUR IN DE LIFEINABOX?

De omgeving waarin de LifeinaBox wordt gebruikt heeft enige invloed op de hoeveelheid koeling die deze levert. Net als de koelkast bij u thuis zal deze minder efficiënt zijn bij blootstelling aan extreme omstandigheden. De LifeinaBox is zo ingesteld dat uw medicijnen tussen 2 en 8 °C (35,6 tot 46,4 °F) worden bewaard.

BIJ WELKE TEMPERATUUR KAN IK LIFEINABOX GEBRUIKEN?

LifeinaBox kan worden gebruikt tot een omgevingstemperatuur van 32°C. Bij deze temperatuur blijft alles in LifeinaBox tussen 2 en 8°C. Aan de andere kant, als u LifeinaBox bij deze temperatuur gebruikt, zullen de batterijen niet zo lang meegaan.

HOE LANG GAAT DE BATTERIJ VAN LIFEINABOX MEE?

LifeinaBox is uitgerust met een interne batterij van 6 uur, voor het geval van stroomuitval.

We hebben ook aparte batterijpakketten (LifeinaPower) van 12 uur elk ontwikkeld. Deze batterijen geven u meer flexibiliteit en kunnen worden opgeladen met uw mobiele telefoonkabels.

Voor reisdoeleinden zijn onze isothermische tassen (LifeinaBag12 en LifeinaBag24) gemakkelijker te gebruiken tijdens vlieguren.

OPMERKINGEN OVER BATTERIJEN:

Als u van plan bent LifeinaBox thuis te gebruiken, schakel dan de batterij uit (onder het apparaat) zodat deze langer meegaat. Maar vergeet niet om de batterij volledig op te laden voor een reis

Als u de batterijmodus wilt gebruiken, zet dan de O/I-schakelaar onder het apparaat in de "AAN" positie

HET LOGO AAN DE VOORKANT VAN LIFEINABOX UITSCHAKELLEN

U kunt het logo uitschakelen door de batterij AAN te zetten en vervolgens dubbel te klikken op de O/I-knop aan de rechterkant van het apparaat.

LIFEINABOX GEBRUIKEN IN EEN AUTO

LifeinaBox wordt geleverd met een kabelaansluiting voor de sigarettenaansteker van uw auto. Echter, om LifeinaBox in een auto te gebruiken, moet u ook de LifeinaTravel transporttas gebruiken en de LifeinaBox aan de achterkant van een stoel hangen, zodat de ventilatieopeningen onder het apparaat vrij blijven. Als u LifeinaBox op een ongelijk oppervlak plaatst, kunt u de ventilatieopeningen blokkeren, en als u de LifeinaBox op de vloer van de auto plaatst, zal het al het stof op de vloer van de auto opzuigen, wat uiteindelijk het ventilatiesysteem zal blokkeren.

LIFEINABOX GEBRUIKEN IN EEN Vliegtuig

LifeinaBox is niet echt ontworpen voor gebruik in een vliegtuig. Het is meer ontworpen voor hotels, auto's, kantoor en thuis. Hoewel u LifeinaBox in een vliegtuig kunt gebruiken, is het veel eenvoudiger om onze speciaal gemaakte LifeinaBags te gebruiken, die veel simpeler zijn en in uw handbagage kunnen glijden. Als u echter besluit om LifeinaBox in een vliegtuig te gebruiken, koop dan de LifeinaTravel transporttas waarmee u LifeinaBox kunt vervoeren met de ventilatieopeningen open.

WAAR MOET IK MIJN LIFEINABOX BEWAREN TIJDENS HET VLIEGEN?

Schakel het apparaat uit en plaats het in uw hoofdbagage. U moet uw medicatie altijd bij u houden, ongeacht het vervoermiddel; **BEWAAR UW MEDICIJNEN NOOIT IN BAGAGE DIE IN DE VLIEGTUIGLAADRUIMTE WORDT INGECHECKT!** Als uw bagage verloren gaat of uw vlucht vertraagd is, kan dit uw vakantie verpesten.

Hoewel het mogelijk is om LifeinaBox in een vliegtuig te gebruiken, denken wij dat het voor vliegreizen eenvoudiger is om een van onze isothermische tassen te gebruiken (LifeinaBag12 of LifeinaBag24, die uw medicatie ook tussen 2 en 8°C houden). De tassen zijn gewoon gemakkelijker in uw handtas te plaatsen dan een draagbare koelkast. We gebruiken LifeinaBox meer in een auto, hotel, thuis dan in een vliegtuig.

Maar als u uw LifeinaBox op reis met u mee wilt nemen in het vliegtuig, is er echt geen enkel probleem om dit te doen. U heeft echter de LifeinaTravel tas nodig om uw koelkast te vervoeren, en u wilt misschien ook een extra batterij (LifeinaPower).

KAN IK LIFEINABOX IN MIJN HANDBAGAGE GEBRUIKEN?

Nee. De reden hiervoor is dat LifeinaBox een koelkast is en ventilatie nodig heeft (onder en aan de zijkant van het apparaat). Als u het in een gesloten koffer plaatst en de stroom aan staat, zal de LifeinaBox oververhit raken. Als u echt het vliegtuig wilt nemen met LifeinaBox, dan moet u LifeinaTravel gebruiken, een speciale draagtas die we hebben ontwikkeld met openingen voor ventilatie.

Toen we LifeinaBox ontwikkelden, was het niet echt ontworpen als een apparaat voor vliegtuigen. Het was eerder ontwikkeld voor gebruik in hotels, op kantoor, thuis of in de auto. Hoewel het in theorie mogelijk is om het in vliegtuigen te gebruiken, is het niet erg praktisch om dit te doen. Het is veel eenvoudiger om een van onze isothermische tassen (LifeinaBag) te gebruiken, die uw medicatie 12 of 24 uur tussen 2 en 8°C houdt en die eenvoudig in uw handbagage kan worden geschoven.

KAN IK LIFEINABOX IN EEN KAST OF IN EEN KOFFER GEBRUIKEN?

Nee. Net als een normale koelkast koelt LifeinaBox door warmte af te voeren. Warmte moet kunnen ontsnappen. Gebruik LifeinaBox dus niet in een ruimte waar weinig of geen luchtwisseling is, omdat er dan geen plaats is voor de warmte om te ontsnappen.

KAN IK LIFEINABOX IN EEN RECHTOPSTAANDE POSITIE GEBRUIKEN?

Nee, als u het in horizontale positie gebruikt, blokkeert u de luchtopeningen en zal het apparaat oververhit raken.

ZAL LIFEINABOX VOORKOMEN DAT MIJN MEDICIJNEN BEVRIEZEN?

Een voorinstelling van het apparaat voorkomt dat uw medicatie onder de 2°C komt om ervoor te zorgen dat uw medicatie nooit bevriest. De LifeinaBox moet echter bij “normale” temperaturen worden gebruikt. Als u uw LifeinaBox bij temperaturen onder nul graden bewaart, zal het niet voorkomen dat uw medicatie bevriest.

ALARMFUNCTIE

Een alarm begint te piepen wanneer de batterij nog maar 20% is opgeladen. Om dit alarm uit te schakelen, klikt u eenvoudig op de O/I-knop aan de rechterkant van het apparaat. Sluit uw LifeinaBox zo snel mogelijk aan op het lichtnet om een onderbreking van de koude toevoer te voorkomen.

WAAROM IS ER EEN KNIPPEREND ROOD/BLAUW LICHT AAN DE ZIJKANT VAN MIJN LIFEINABOX?

Het lampje aan de zijkant van LifeinaBox (naast de O/I-knop) brandt continu blauw wanneer de LifeinaBox via Bluetooth is verbonden met uw telefoon of computer. Wanneer het afwisselend rood en blauw knippert, betekent dit dat uw apparaat niet met iets is verbonden.

IS LIFEINABOX WATERDICHT?

Nee, LifeinaBox is zoals elk elektrisch apparaat. Het is niet waterdicht en moet in een droge omgeving worden bewaard.

HOEVEEL STROOM GEBRUIKT LIFEINABOX? ZAL HET MIJN AUTOBATTERIJ LEEGMAKEN?

LifeinaBox gebruikt 4,5 ampère 12V gelijkstroom, ongeveer hetzelfde als één koplamp. LifeinaBox zou een volledig opgeladen batterij niet moeten leegmaken of beschadigen wanneer het wordt gebruikt terwijl de motor draait. Elk voertuig en elke batterij is uniek. Vraag uw dealer of monteur om de kwaliteit van uw batterij te controleren voordat u een apparaat aansluit dat deze kan leegmaken.

ZORG EN ONDERHOUD

- Laat het apparaat niet vallen, wijzig of demonteer het niet.
- Buig of draai de stroomkabels niet.
- Er zijn luchtopeningen aan de zijkanten en onder het apparaat. Deze openingen moeten vrij blijven voor luchtcirculatie. Sluit LifeinaBox niet aan op een stroombron wanneer het zich in een gesloten ruimte bevindt, zoals ingepakte bagage of een bureaulade.
- LifeinaBox mag nooit worden ondergedompeld in vloeistof of worden blootgesteld aan overmatig vocht. Gebruik een doek bevochtigd met water of neutraal reinigingsmiddel om het apparaat schoon te maken.
- Vermijd hoge temperaturen, direct zonlicht, hoge vochtigheid of stof.

DE LIFEINA KWALITEITSGARANTIE

We garanderen LifeinaBox voor één jaar vanaf de aankoopdatum door de klant. Gedurende deze periode verzekert Lifeina gratis reparatie van interne storingen of fabricagefouten. Als u een probleem

ondervindt met uw LifeinaBox, verpak deze dan zorgvuldig en stuur het naar het Lifeina-kantoor, samen met een kopie van uw factuur.

Helaas dekt onze garantie geen schade veroorzaakt door vallen of stoten, door foutieve behandeling of de tussenkomst van een derde partij, door natuurrampen, of door water.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Parameter	Waarde
Afmetingen	220 (B) x 107 (D) x 110 (H) mm
Capaciteit	180 x 65 x 40 mm (468 cm ³)
Nettogewicht	1400 gm
Voltage	12V DC (auto) of 110-240V AC
Stroomverbruik	25 watt max
Temperatuurbereik	2°C tot 8°C, +/- 1°C
Isolatie	CFC-vrij polyurethaanschuim
Systeem	Slijtagevrije thermo-elektrische technologie met interne halfgeleiderventilator
Materiaal	ABS

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden onderworpen aan technische verbeteringen, wijzigingen of aanpassingen.



www.lifeina.com

Lifeina

6 rue de Castellane
75008, Paris, France

hello@lifeina.com