

lifeinabox

Live your life



Instrukcja obsługi



Lifeina

6 rue de Castellane
75008, Paris, France
hello@lifeina.com

WITAJ W RODZINIE LIFEINA

LifeinaBox to produkt miłości i szczęścia. Naprawdę staraliśmy się stworzyć urządzenie tak doskonale, jak to tylko możliwe. Uwielbiamy stale ulepszać nasze produkty. Jeśli więc masz jakieś uwagi lub sugestie, nie wahaj się z nami skontaktować pod adresem hello@lifeina.com.

Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

CZYM JEST LIFEINABOX?

LifeinaBox to miniaturowa lodówka do bezpiecznego przechowywania delikatnych leków. LifeinaBox posiada regulator temperatury, który włącza urządzenie, gdy temperatura wewnętrzna osiągnie 8°C (46°F) i wyłącza je, gdy spadnie do 2°C (36°F). LifeinaBox nie zapobiega zamarzaniu leków, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 0°C (32°F).

LifeinaBox został zaprojektowany z myślą o prostej i łatwej obsłudze. Podłącz do urządzenia odpowiednie źródło zasilania (samochód, sieć lub akumulator), poczekaj, aż temperatura się ustabilizuje (około 15 minut) i umieść w środku lek. Gdy temperatura osiągnie zakres od 2 do 8°C, logo znajdujące się przed urządzeniem zaczyna „oddychać” (rozjaśniać się i pojawiać). Pod urządzeniem znajduje się wyłącznik akumulatora O/I. Jeśli chcesz korzystać z baterii, włącz ją.

Środowisko, w którym LifeinaBox jest używany, jest bardzo ważne. Należy go używać na całkowicie płaskiej powierzchni, tak aby otwory pod i z boku urządzenia były odstonięte. Jeśli zostaną w jakikolwiek sposób zablokowane, LifeinaBox nie będzie miał temperatury właściwej dla Twojego leku. Podczas podróży samochodem należy używać torby transportowej LifeinaTravel, aby mieć pewność, że LifeinaBox nie zostanie umieszczony na podłodze samochodu lub na nierównej powierzchni. Położony na podłodze samochodu zasysa kurz, który ostatecznie blokuje wentylator.

LifeinaBox jest wyposażony w port 12 V DC (do samochodu) i zasilacz 110/240 V AC (do domu). Oddzielne akumulatory Lifeina są również dostępne jako osobne zakupy. Zmiana przewodu zasilającego lub użycie przewodu, który nie został dostarczony w zestawie LifeinaBox, może spowodować uszkodzenie urządzenia, zagrożić skuteczności leku i unieważnić gwarancję.

Jeśli używasz LifeinaBox do szklanych butelek z lekami, zalecamy umieszczenie materiału amortyzującego pomiędzy butelkami z lekami, aby zabezpieczyć je przed przypadkowym stłuczeniem.

POŁĄCZ SIĘ Z APLIKACJĄ LIFEINA

Pobierz aplikację Lifeina na swój smartfon (iOS lub Android).

- 1) Włącz Bluetooth w swoim smartfonie.
- 2) Podłącz LifeinaBox do źródła zasilania.
- 3) Otwórz aplikację Lifeina na swoim smartfonie. Umieść LifeinaBox w pobliżu smartfona i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

CO W ZESTAWIE Z LIFEINABOX?

- Przenośna lodówka o wymiarach około 20 x 10 x 10 cm
- Adapter ACDC 110/220 V z 4 różnymi wtyczkami dla USA, Chin, Europy, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii
- Kabel do podłączenia LifeinaBox do gniazda zapalniczki samochodowej

JAK WIELKOŚĆ JEST Wgłębienie w LIFEINABOX?

Dokładne wymiary wnęki to 180 mm szerokości, 64 mm głębokości i 40 mm wysokości.

JAKIE SĄ WYMIARY ZEWNĘTRZNE LIFEINABOX?

LifeinaBox ma 22 cm szerokości, 10,7 cm wysokości i 11 cm głębokości i waży około 1400 kg.


DO JAKICH LEKÓW MOGĘ STOSOWAĆ LIFEINABOX?

LifeinaBox nadaje się do wszystkich leków, które muszą być przechowywane w temperaturze od 2 do 8°C (35,6 do 46,4°F). Należą do nich insulina, adrenalina, hormony wzrostu, leki na zapalenie stawów i wiele innych. Wstępnie napełnione wstrzykiwacze, strzykawki lub butelki mieszczą się w zagłębieniu LifeinaBox. Jeżeli zmieści się w zagłębieniu, będzie utrzymywane w odpowiedniej temperaturze. Aby uzyskać więcej informacji, pobierz nasz obszerny przewodnik po lekach na stronie www.lifeina.com.

ŁADOWANIE AKUMULATORA LIFEINABOX

Przed użyciem urządzenia akumulator LifeinaBox musi być w pełni naładowany (patrz rysunek 1).

- 1) Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania (1)
- 2) Ustaw przełącznik O/I pod urządzeniem w pozycji ON (2)
- 3) Wciśnij przycisk z boku urządzenia (3) aż zgaśnie logo z przodu (ok. 5 sekund).
- 4) Pozwól mu ładować się przez dwie godziny lub przez noc
- 5) Włącz urządzenie naciskając przycisk z boku urządzenia i sprawdź, czy jest w pełni naładowane za pomocą aplikacji Lifeina

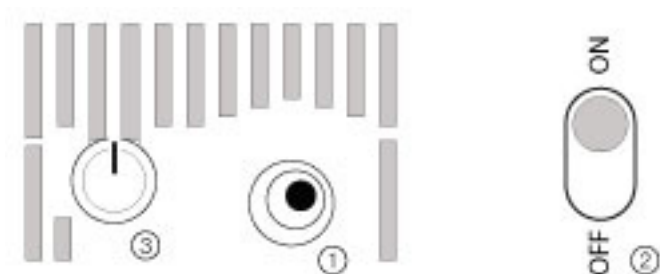

SKORZYSTAJ Z SUBSKRYPCJI NA ŻYCIE

- Podłącz urządzenie do zasilania i naładuj całkowicie akumulator (patrz wyżej)

- Włącz LifeinaBox naciskając przycisk z boku urządzenia
- Poczekaj, aż LifeinaBox osiągnie stabilną temperaturę (około 15 minut)
- Włóż do środka leki
- Aby korzystać z aplikacji Lifeina, wystarczy ją pobrać i włączyć w zasięgu LifeinaBox

JAKA JEST TEMPERATURA W LIFEINABOX?

Środowisko, w którym LifeinaBox jest używany, ma pewien wpływ na ilość zapewnianego przez niego chłodzenia. Podobnie jak lodówka w Twoim domu, będzie mniej wydajna, gdy zostanie wystawiona na działanie ekstremalnych warunków.

LifeinaBox jest przystosowany do przechowywania leków w temperaturze od 2 do 8°C (35,6 do 46,4°F).

W JAKIEJ TEMPERATURZE MOGĘ KORZYSTAĆ Z LIFEINABOX?

LifeinaBox może być używany w temperaturze otoczenia do 32°C. W tej temperaturze wszystko w LifeinaBox utrzymuje się w przedziale od 2 do 8°C. Z drugiej strony, jeśli używasz LifeinaBox w tej temperaturze, baterie nie wytrzymają tak długo.

JAK DŁUGO WYTRZYMUJE BATERIA W LIFEINABOX?

LifeinaBox jest wyposażony w wewnętrzną 6-godzinną baterię na wypadek zaniku zasilania.

Opracowaliśmy także osobne zestawy akumulatorów (LifeinaPower) o pojemności 6 godzin każdy. Baterie te zapewniają większą elastyczność i można je ładować za pomocą kabli do telefonu komórkowego.

Do celów podróźniczych nasze torby izolowane (LifeinaBag12 i LifeinaBag24) są łatwiejsze w obsłudze podczas lotu.

UWAGI DOTYCZĄCE AKUMULATORA:

- Jeśli chcesz korzystać z LifeinaBox w domu, wyłącz baterię

(pod urządzeniem), aby działała dłużej. Nie zapomnij jednak o jego pełnym naładowaniu przed podróżą

- Jeśli chcesz korzystać z zasilania akumulatorowego, ustaw przełącznik O/I pod urządzeniem w pozycji „ON”.

WYŁĄCZENIE LOGO PRZED SUBSKRYPCJĄ LIFE

Logo możesz wyłączyć poprzez włączenie baterii, a następnie dwukrotne kliknięcie przycisku O/I znajdującego się po prawej stronie urządzenia.

KORZYSTANIE Z LIFEINABOX W SAMOCHODZIE

LifeinaBox jest wyposażony w złącze kablowe do zapalniczki samochodowej. Jednakże, aby używać LifeinaBox w samochodzie, musisz także użyć torby LifeinaTravel i zawiesić LifeinaBox na oparciu siedzenia, aby wyczyścić otwory wentylacyjne pod urządzeniem. Jeśli umieścisz LifeinaBox na nierównej powierzchni, możesz zablokować otwory wentylacyjne, a jeśli umieścisz LifeinaBox na podłodze samochodu, zasysa on cały kurz z podłogi samochodu, co ostatecznie zablokuje wentylację system.

KORZYSTANIE Z ABONAMENTU ŻYCIA W SAMOlocie

LifeinaBox tak naprawdę nie został zaprojektowany do użytku w samolocie. Jest przeznaczony bardziej do hoteli, samochodów, biur i domów. Chociaż z LifeinaBox możesz korzystać w samolocie, znacznie łatwiej jest skorzystać z naszych szytych na miarę toreb LifeinaBags, które są o wiele łatwiejsze i mieszczą się w Twoim bagażu podręcznym. Jeśli jednak zdecydujesz się na korzystanie z LifeinaBox w samolocie, prosimy o zakup torby transportowej LifeinaTravel, która umożliwia transport LifeinaBox przy otwartych otworach wentylacyjnych.

GDZIE MAM PRZECHOWYWAĆ SWOJĄ SUBSKRYPCJĘ LIFE PODCZAS LOTU?

Wyłącz urządzenie i włóż je do głównego bagażu. Lek należy zawsze nosić przy sobie, niezależnie od środka transportu; NIGDY

NIE PRZECHOWYWAJ LEKÓW W BAGAŻU REJESTROWANYM W SALONIE W PRZECHOWANIU ŁADUNKU! Jeśli zaginie Twój bagaż lub Twój lot zostanie opóźniony, może to zrujnować Twoje wakacje.

Chociaż w samolocie można korzystać z LifeinaBox, uważamy, że w podróży lotniczej łatwiej jest skorzystać z jednej z naszych toreb izotermicznych

(LifeinaBag12 lub LifeinaBag 24, w których również przechowywane są leki w temperaturze od 2 do 8°C). Torby są po prostu łatwiejsze do przechowywania w torebce niż przenośna lodówka. Z LifeinaBox chętniej korzystamy w samochodzie, hotelu czy domu niż w samolocie.

Jeśli jednak chcesz zabrać ze sobą LifeinaBox w podróż samolotem, nie stanowi to żadnego problemu. Do transportu lodówki będziesz jednak potrzebować torby LifeinaTravel. Możesz także zakupić dodatkowy akumulator (LifeinaPower).

CZY MOGĘ UŻYWAĆ LIFEINABOX W BAGAŻU PODRĘCZNYM?

NIE. Powodem tego jest to, że LifeinaBox jest lodówką i wymaga wentylacji (pod i z boku urządzenia). Jeśli umieścisz go w zamkniętej obudowie i będzie on włączony, LifeinaBox przegrzeje się. Jeśli naprawdę chcesz latać samolotem z LifeinaBox, musisz skorzystać z LifeinaTravel, specjalnego zaprojektowanego przez nas etui z otworami wentylacyjnymi.

Kiedy opracowywaliśmy LifeinaBox, nie był on tak naprawdę zaprojektowany jako urządzenie dla samolotów. Został raczej opracowany do użytku w hotelach, biurze, domu lub samochodzie. Chociaż teoretycznie można go używać w samolotach, jest to mało praktyczne. Dużo łatwiej jest skorzystać z naszych izolowanych toreb (LifeinaBag), które przechowują leki w temperaturze od 2 do 8°C przez 12 lub 24 godziny i które z łatwością mieszczą się w bagażu podręcznym.

CZY MOGĘ UŻYWAĆ LIFEINABOX W SZAFCE LUB W WALIZCE?

NIE. Podobnie jak zwykła lodówka, LifeinaBox chłodzi poprzez usuwanie ciepła. Ciepło musi zostać rozproszone. Dlatego nie używaj LifeinaBox w miejscu, w którym wymiana powietrza jest niewielka lub nie ma jej wcale, ponieważ ciepło nie ma dokąd uciec.

CZY MOGĘ UŻYWAĆ LIFEINABOX W POZYCJI PIONOWEJ?

Nie, jeśli będziesz używać go w pozycji poziomej, zablokujesz otwory wentylacyjne i urządzenie się przegrzeje.

CZY LIFEINABOX ZABEZPIECZY MÓJ LEK PRZED ZAMROŻENIEM?

Wstępnie ustawione urządzenie zapobiega spadkowi temperatury leku poniżej 2°C, dzięki czemu lek nigdy nie zamarznie. Jednakże LifeinaBox należy używać w „normalnych” temperaturach. Przechowywanie LifeinaBox w temperaturach poniżej zera nie zapobiegnie zamarznięciu leków.

FUNKCJA ALARMOWA

Alarm włączy się, gdy poziom naładowania baterii osiągnie 20%. Aby wyłączyć ten alarm, wystarczy kliknąć przycisk O/I po prawej stronie urządzenia. Aby uniknąć przerw w dostawie chłodzenia, podłącz LifeinaBox do sieci energetycznej tak szybko, jak to możliwe.

DLACZEGO Z BOKU MOJEJ SUBSKRYPCJI LIFE MIGA CZERWONE/NIEBIESKIE ŚWIATŁO?

Mała dioda z boku LifeinaBox (obok przycisku O/I) świeci się stale na niebiesko, gdy LifeinaBox jest podłączony do telefonu lub komputera przez Bluetooth. Jeśli miga na przemian na czerwono i niebiesko, oznacza to, że Twoje urządzenie nie jest z niczym połączone.

CZY LIFEINABOX JEST WODOSZCZELNY?

Nie, LifeinaBox jest jak każde urządzenie elektryczne. Nie jest wodoodporny i należy go przechowywać w suchym miejscu.

ILE PRĄDU ZUŻYWA LIFEINABOX? CZY AKUMULATOR MOJEGO SAMOCHODU BĘDZIE SPRAWNY?

LifeinaBox zużywa 4,5 A przy napięciu 12 V DC, mniej więcej tyle samo, co pojedynczy reflektor. LifeinaBox nie powinien rozładowywać ani uszkadzać w pełni naładowanego akumulatora, gdy jest używany przy pracującym silniku. Każdy pojazd i każdy akumulator jest wyjątkowy. Poproś sprzedawcę lub mechanika o sprawdzenie jakości akumulatora przed podłączeniem jakiegokolwiek urządzenia, które mogłoby go rozładować.

PIEŁĘGNACJA I KONSERWACJA

- Nie upuszczaj, nie modyfikuj ani nie demontuj urządzenia.
- Nie zginaj ani nie skręcaj przewodów zasilających.
- Po bokach i pod urządzeniem znajdują się szczeliny wentylacyjne. Otwory te muszą być drożne, aby umożliwić cyrkulację powietrza. Nie podłączaj LifeinaBox do źródła zasilania, gdy znajduje się on w zamkniętym pomieszczeniu, takim jak zapakowany bagaż lub szuflada biurka.
- LifeinaBox nigdy nie powinien być zanurzany w cieczach ani narażony na działanie nadmiernej wilgoci. Do czyszczenia urządzenia należy używać ściereczki zwilżonej wodą lub neutralnym detergentem.
- Unikaj wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego, dużej wilgotności i kurzu.

GWARANCJA JAKOŚCI LIFEINA

Na LifeinaBox udzielamy rocznej gwarancji od daty zakupu przez Klienta. W tym okresie Lifeina gwarantuje bezpłatną naprawę błędów wewnętrznych lub wad produkcyjnych. Jeśli masz problem ze swoim LifeinaBoxem, prosimy o jego staranne spakowanie

i przesłanie do biura Lifeina wraz z kopią faktury.

Niestety nasza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych upadkami lub uderzeniami, niewłaściwą obsługą lub interwencją osób trzecich, klęskami żywiołowymi lub wodą.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wymiary: 220 (szer.) x 107 (gł.) x 110 (wys.) mm

Pojemność: 180 x 65 x 40 mm (468 cm³)

Masa netto: 1400g

Napięcie: 12 V DC (samochód) lub 110-240 V AC

Pobór mocy: maks. 25 watów

Zakres temperatur: 2°C do 8°C, +/- 1°C

Izolacja: bezfreonowa pianka poliuretanowa

System: Niezużywający się termoelektryk z wewnętrznym wentylatorem półprzewodnikowym

Materiał: ABS

Specyfikacje mogą podlegać ulepszeniom technicznym, zmianom lub modyfikacjom bez powiadomienia.



www.lifeina.com

Lifeina

6 rue de Castellane
75008, Paris, France

hello@lifeina.com