

lifeinabox

Live your life



Bruksanvisning



Lifeina

6 rue de Castellane
75008, Paris, France
hello@lifeina.com

VÄLKOMMEN TILL LIFEINA-FAMILJEN

LifeinaBox är en produkt av kärlek och lycka. Vi försökte verkligen göra en enhet så perfekt som möjligt. Och vi älskar att ständigt förbättra våra produkter. Så om du har några kommentarer eller förslag, tveka inte att kontakta oss på hello@lifeina.com.

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder enheten.

VAD ÄR LIFEINABOX?

LifeinaBox är ett miniatyrkylskåp för säker förvaring av ömtåliga läkemedel. LifeinaBox har en temperaturkontroll som sätter på enheten när den interna temperaturen når 8°C (46°F) och stänger av den när den sjunker till 2°C (36°F). LifeinaBox förhindrar inte att medicin fryser när omgivningstemperaturen faller under 0°C (32°F).

LifeinaBox är designad för enkel, enkel användning. Anslut rätt strömkälla (bil, elnät eller batteri) till enheten, vänta tills temperaturen har stabiliserats (cirka 15 minuter) och placera din medicin inuti. När temperaturen når mellan 2 och 8°C börjar logotypen framför enheten "andas" (tonas in och ut). Det finns en O/I batteri-strömbrytare under enheten. Om du vill använda batteriet, slå på det.

Miljön där LifeinaBox används är mycket viktig. Den måste användas på en helt plan yta så att öppningarna under och på sidan av enheten är fria. Om de är blockerade på något sätt kommer LifeinaBox inte att ha rätt temperatur för din medicin. När du reser i bilen, använd LifeinaTravel-transportväskan för att säkerställa att LifeinaBox inte placeras på bilgolvet eller på ett ojämnt underlag. När den placeras på golvet i en bil suger den upp damm som till slut blockerar fläkten.

LifeinaBox kommer med en 12V DC-port (för bil) och en 110/240V AC-adapter (för hemmet). Separata Lifeina-batteripaket finns också som separata köp. Att byta nätsladd eller använda en sladd som inte följde med LifeinaBox kan skada enheten, äventyra läkemedlets effektivitet och ogiltigförklara din garanti.

Om du använder LifeinaBox för medicinflaskor av glas rekommenderar vi att du placerar stötdämpande material mellan dina medicinflaskor för att skydda dem från oavsiktligt brott.

ANSLUT TILL LIFEINA-APPEN

Ladda ner Lifeina-appen på din smartphone (iOS eller Android).

- 1) Slå på Bluetooth på din smartphone.
- 2) Anslut LifeinaBox till en strömkälla.
- 3) Öppna Lifeina-appen på din smartphone. Placera LifeinaBox nära din smartphone och följ instruktionerna i appen.

VAD KOMMER MED LIFEINABOXEN?

- Ett portabelt kylskåp som mäter cirka 20 x 10 x 10 cm
- En ACDC-adapter 110/220V med 4 olika kontakter för USA, Kina, Europa, Schweiz och Storbritannien
- En kabel för att koppla in LifeinaBox till bilens cigarettändare

HUR STORLEK ÄR HUVUDAN I LIFEINABOXEN?

De exakta måtten på kaviteten är 180 mm bred x 64 mm djup x 40 mm hög.

VILKA ÄR LIFEINABOXENS YTTRE DIMENSIONER?

LifeinaBox är 22 cm bred, 10,7 cm hög och 11 cm djup och väger cirka 1 400 kg.


VILKA MEDICINER KAN JAG ANVÄNDA LIFEINABOX FÖR?

LifeinaBox är lämplig för alla mediciner som behöver förvaras vid en temperatur mellan 2 och 8°C (35,6 till 46,4°F). Dessa inkluderar insuliner, adrenalin, tillväxthormoner, artritmediciner och mycket mer. Förfyllda pennor, sprutor eller flaskor passar in i håligheten på LifeinaBox. Om den passar in i håligheten kommer den att hållas vid rätt temperatur. Ladda ner vår omfattande medicinguide på www.lifeina.com för mer information.

LADDNING AV LIFEINABOX-BATTERIET

LifeinaBox-batteriet måste vara fulladdat innan du använder enheten (se figur 1).

- 1) Se till att enheten är ansluten till ström (1)
- 2) Placera O/I-omkopplaren under enheten i PÅ-läget (2)
- 3) Tryck på knappen på sidan av enheten (3) tills logotypen på framsidan slocknar (ca 5 sekunder).
- 4) Låt den ladda i två timmar eller över natten
- 5) Slå på enheten genom att trycka på knappen på sidan av enheten och kontrollera om den är fulladdad med hjälp av Lifeina-appen

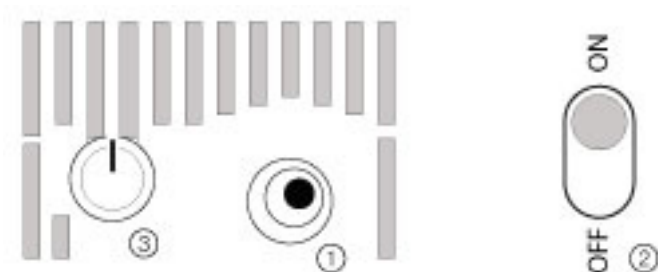

ANVÄND LIFE PRENUMERATION

- Anslut enheten till ström och ladda batteriet helt (se ovan)
- Slå på LifeinaBox genom att trycka på knappen på sidan av enheten
- Vänta tills LifeinaBox har nått en stabil temperatur (ca 15 minuter)
- Lägg in dina mediciner
- För att använda Lifeina-applikationen laddar du bara ner appen och slår på den inom räckhåll för din LifeinaBox

VAD ÄR TEMPERATUREN I LIFEINABOXEN?

Miljön där LifeinaBox används har viss inverkan på hur mycket

kylning den ger. Precis som kylskåpet i ditt hem blir det mindre effektivt när det utsätts för extrema förhållanden.

LifeinaBox är inställd för att lagra dina mediciner mellan 2 och 8°C (35,6 till 46,4°F).

VID VILKEN TEMPERATUR KAN JAG ANVÄNDA LIFEINABOX?

LifeinaBox kan användas upp till en omgivningstemperatur på 32°C. Vid denna temperatur håller allt i LifeinaBox sig mellan 2 och 8°C. Å andra sidan, om du använder LifeinaBox vid denna temperatur kommer batterierna inte att hålla lika länge.

HUR LÄNGE HAR BATTERIET I LIFEINABOXEN?

LifeinaBox är utrustad med ett internt 6-timmars batteri ifall strömmen skulle gå.

Vi har även tagit fram separata batteripaket (LifeinaPower) på 6 timmar vardera. Dessa batterier ger dig mer flexibilitet och kan laddas med hjälp av dina mobiltelefonkablar.

För reseändamål våra isolerade väskor (LifeinaBag12 och LifeinaBag24) är lättare att hantera när du flyger.

ANMÄRKNINGAR OM BATTERI:

- Om du vill använda LifeinaBox hemma, stäng av batteriet (under enheten) för att det ska hålla längre. Men glöm inte att ladda den helt innan en resa
- Om du vill använda batteriström, ställ O/I-omkopplaren under enheten i läge "ON".

ATT STÄNGA AV LOGON FRÅN LIFE-prenumerationen

Du kan stänga av logotypen genom att slå på batteriet och sedan dubbelklicka på O/I-knappen på enhetens högra sida.

ANVÄNDA LIFEINABOXEN I EN BIL

LifeinaBox levereras med en kabelanslutning för din bils cigarettändare. Men för att använda LifeinaBox i en bil måste du också använda LifeinaTravel-väskan och hänga LifeinaBox från baksidan av ett säte för att rensa ventilerna under enheten. Om du placerar LifeinaBox på ett ojämnt underlag kan du blockera ventilationshålen, och om du placerar LifeinaBox på bilens golv kommer den att suga upp allt damm från bilens golv och detta blockerar så småningom ventilationen system.

ANVÄNDA LIFE-PRENUMERATION PÅ ETT FLYGPLAN

LifeinaBox var egentligen inte designad för användning på ett flygplan. Den är designad mer för hotell, bilar, kontor och hem. Även om du kan använda LifeinaBox på flyget, är det mycket lättare att använda våra skraddarsydda LifeinaBags, som bara är så mycket enklare och får plats i ditt handbagage. Men om du bestämmer dig för att använda LifeinaBox på ett flygplan, vänligen köp LifeinaTravel-transportväskan, som gör att du kan transportera LifeinaBox med ventilerna öppna.

VAR SKA JAG FÖRVARA MITT LIVSPRENUMERATION NÄR JAG FLYGER?

Stäng av enheten och lägg den i ditt huvudbagage. Du ska alltid ha med dig din medicin oavsett transportmedel; **HÅLL ALDRIG DIN MEDICIN I BAGAGET INNEJACKAD I PLANET I LASTFÖRVARING!** Om ditt bagage tappas bort eller ditt flyg är försenat kan det förstöra din semester.

Även om det är möjligt att använda LifeinaBox på ett flygplan, tror vi att det är lättare för flygresor att använda en av våra isotermiska väskor

(LifeinaBag12 eller LifeinaBag 24, som också håller din medicin mellan 2 och 8°C). Väskorna är helt enkelt lättare att förvara i handväskan än ett bärbart kylskåp. Vi är mer benägna att använda LifeinaBox i en bil, hotell eller hem än på ett flygplan.

Men vill du ta med dig din LifeinaBox på en flygresor är det egentligen inga problem alls. Du behöver dock LifeinaTravel-väska för att transportera ditt kylskåp och du kanske också vill köpa ett extra batteri (LifeinaPower).

KAN JAG ANVÄNDA LIFEINABOX I MITT HANDBAGAGE?

Inga. Anledningen till detta är att LifeinaBox är ett kylskåp och kräver ventilation (under och på sidan av enheten). Om du lägger den i ett stängt fodral och den slås på kommer LifeinaBox att överhettas. Om du verkligen vill flyga på planet med LifeinaBox behöver du använda LifeinaTravel, en speciell bärväska vi designat med ventilationshål.

När vi utvecklade LifeinaBox var den inte riktigt designad som en enhet för flygplan. Snarare utvecklades den för användning på hotell, på kontoret, hemma eller i bilen. Även om det är teoretiskt möjligt att använda det på flygplan, är det inte särskilt praktiskt att göra det. Det är mycket enklare att använda en av våra isolerade väskor (LifeinaBag), som håller din medicin mellan 2 och 8°C i 12 eller 24 timmar och lätt kan läggas i ditt handbagage.

KAN JAG ANVÄNDA LIFEINABOX I ETT SKÅP ELLER I EN Koffert?

Inga. Precis som ett vanligt kylskåp kyler LifeinaBox genom att ta bort värme. Värmen måste avledas. Så använd inte LifeinaBox i ett område där det finns lite eller inget luftutbyte eftersom värmen inte har någonstans att ta vägen.

KAN JAG ANVÄNDA LIFEINABOX I UPPRETT LÄGE?

Nej, om du använder den i horisontellt läge kommer du att blockera ventilationshålen och enheten kommer att överhettas.

KOMMER LIFEINABOX ATT FÖRHINDRA MIN MEDICIN FRÅN FRYSNING?

En förinställd enhet förhindrar att din medicin faller under 2°C för att säkerställa att din medicin aldrig fryser. LifeinaBox måste dock

användas vid "normala" temperaturer. Att förvara din LifeinaBox vid temperaturer under noll kommer inte att förhindra att din medicin fryser.

LARMFUNKTION

Ett larm ljuder när batteriet når 20 % laddning. För att stänga av detta larm, klicka helt enkelt på O/I-knappen på enhetens högra sida. Anslut din LifeinaBox till elnätet så snabbt som möjligt för att undvika avbrott i kyltillförseln.

VARFÖR BLINKAR DET ETT RÖTT/BLÅT LJUS PÅ SIDAN AV MITT LIVS-ABONNERATION?

Den lilla på sidan av LifeinaBox (bredvid O/I-knappen) lyser konstant blått när LifeinaBox är ansluten till din telefon eller dator via Bluetooth. Om den blinkar rött och blått omväxlande betyder det att din enhet inte är ansluten till någonting.

ÄR LIFEINABOX VATTENTÄT?

Nej, LifeinaBox är som vilken elektrisk enhet som helst. Den är inte vattentät och bör förvaras i en torr miljö.

HUR MYCKET EL FÖRBRUKAR LIFEINABOX? FUNGERAR MITT BILBATTERI?

LifeinaBox använder 4,5 ampere vid 12V DC, ungefär samma som en enkel spotlight. LifeinaBox får inte tömma eller skada ett fulladdat batteri när den används med motorn igång. Varje fordon och varje batteri är unikt. Be din återförsäljare eller mekaniker att kontrollera kvaliteten på ditt batteri innan du ansluter någon enhet som kan tömma det.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Tappa, modifiera eller demontera inte enheten.
- Böj eller vrid inte nätkablarna.
- Det finns ventilationsöppningar på sidorna och under enheten.

Dessa öppningar måste hållas fria så att luft kan cirkulera. Anslut inte LifeinaBox till en strömkälla när den är i ett slutet utrymme som packat bagage eller en skrivbordslåda.

- LifeinaBox får aldrig nedsänkas i vätska eller utsättas för överdriven fukt. För att rengöra enheten, använd en trasa fuktad med vatten eller ett neutralt rengöringsmedel.
- Undvik höga temperaturer, direkt solljus, hög luftfuktighet eller damm.

LIFEINAS KVALITETSGARANTI

Vi garanterar LifeinaBox i ett år från inköpsdatum av kunden. Under denna period garanterar Lifeina att interna fel eller tillverkningsfel kommer att repareras kostnadsfritt. Om du har problem med din LifeinaBox, packa den noggrant och skicka den till Lifeinas kontor tillsammans med en kopia av din faktura.

Tyvärr täcker inte vår garanti skador orsakade av fall eller stötar, felaktig hantering eller tredje parts ingripande, naturkatastrofer eller vatten.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Mått: 220 (B) x 107 (D) x 110 (H) mm

Kapacitet: 180 x 65 x 40 mm (468 cm³)

Nettovikt: 1400g

Spänning: 12V DC (bil) eller 110-240V AC

Strömförbrukning: max 25 watt

Temperaturområde: 2°C till 8°C, +/- 1°C

Isolering: CFC-fritt polyuretanskum

System: Slitagefri termoelektrik med intern halvledarfläkt

Material: ABS

Specifikationerna är föremål för tekniska förbättringar, ändringar eller modifieringar utan föregående meddelande.



www.lifeina.com

Lifeina

6 rue de Castellane
75008, Paris, France

hello@lifeina.com