

QUICK USER GUIDE

CHARGING THE BATTERY

The LifeinaBox battery needs to be fully charged before you start using the device

- 1) Make sure the device is connected to the power ①
- 2) Flick the O/I switch **under the device** to the ON position ②
- 3) Press the button **on the side** of the device twice to switch it off ③
- 4) Leave it to charge for two hours

USING LIFEINABOX


- Connect it to the power and fully charge the battery (see above)
- Switch on LifeinaBox by either:
 - 1) Pressing the button on side of device once ③
 - 2) Unplugging the device and plugging it back in
- Wait for LifeinaBox to reach a stable temperature (about 15 minutes)
- Place your medication inside
- To use the Lifeina application, simply download the app and turn it on within distance of your LifeinaBox

NOTES

- If you are planning on using LifeinaBox at home, switch off the battery (under the device ②) so that it lasts longer. But don't forget to fully charge it before a trip
- If you want to use the battery mode, flick the O/I switch under the device to the "ON" position
- Be happy

Please do not block the air vents on the side and under the device

DIAGRAMS

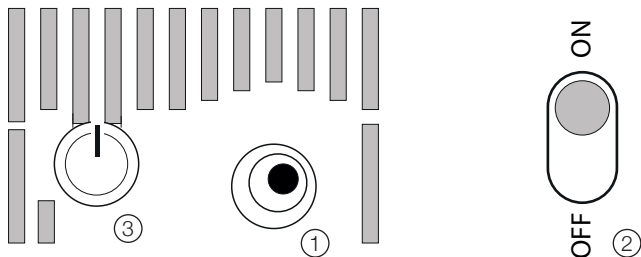

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

La batterie doit être complètement chargée avant d'utiliser l'appareil pour la première fois :

- 1) Connectez LifeinaBox à une alimentation électrique ①
- 2) Faites glisser l'interrupteur O/I sous l'appareil en position ON ②
- 3) Appuyez rapidement deux fois sur le bouton situé sur le côté de l'appareil pour l'éteindre complètement ③
- 4) Laissez-le charger pendant deux heures

UTILISATION DE LIFEINABOX

- Connectez LifeinaBox au secteur et chargez complètement la batterie
- Allumez LifeinaBox :
 - 1) en appuyant une fois sur le bouton sur le côté de l'appareil ③
 - 2) ou en débranchant l'appareil et en le rebranchant
- Attendez que LifeinaBox atteigne une température stable (environ 15 minutes)
- Placez vos médicaments à l'intérieur
- Pour utiliser l'application Lifeina, téléchargez l'application et activez-la à proximité de votre LifeinaBox

NOTES

- Si vous envisagez d'utiliser LifeinaBox chez vous, éteignez la batterie (située sous l'appareil ②) afin qu'elle dure plus longtemps. Mais n'oubliez pas de la charger complètement avant de partir en voyage
- Si vous souhaitez utiliser le mode batterie, glissez le commutateur O/I situé sous l'appareil en position ON
- Soyez heureux

Ne bloquez pas les fentes d'aération sur le côté et sous l'appareil

www.lifeina.com

